




Fairywill

E11

Fairywill

-  Fairywill
-  [www.fairywill.com](http://www.fairywill.com)
-  [support@fairywill.com](mailto:support@fairywill.com)



**Model: E11**

Звуковая электрическая зубная щетка

Дыбыстық электрлік тіс щеткасы

Руководство по эксплуатации (RU) ..... 01

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (KZ) ..... 07

# Важные меры безопасности:

Вся информация в этом разделе предоставлена для того, чтобы проинструктировать вас о правильной и безопасной эксплуатации этого устройства, чтобы вы могли избежать травм для себя и других, а также ущерба имуществу.

## Прочитать инструкции перед использованием продукта

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене. Когда срок службы батареи подходит к концу, прибор следует утилизировать надлежащим образом. Ориентировочный срок службы батареи 5 лет.
4. Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
5. Уведомляем вас об опасности короткого замыкания металлических предметов на клеммах прибора, работающего на батарейках, или аккумулятора.
6. Прибор должен заряжаться только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.
7. Необходимо использовать источник питания с выходной мощностью, не превышающей 15 Вт.
8. Пожалуйста, используйте адаптер таким образом, чтобы во время зарядки напряжение составляло 5 В = 1000 мА, в противном случае чрезмерная зарядка может привести к повреждению аккумулятора.
9. Если аккумулятор поврежден или протекает, избегайте контакта с кожей или глазами. Если это произойдет, немедленно хорошо промойте необходимые участки водой и обратитесь за медицинской помощью.
10. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

В устройство встроена перезаряжаемая литиевая батарея. При утилизации прибора не смешивайте его с обычными бытовыми отходами. Его следует отправить в центр утилизации аккумулятора для утилизации в соответствии с местными правилами утилизации.

## Переработка и экологически чистая утилизация




Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Убедившись в правильности утилизации данного изделия, вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации о вторичной переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным советом или службой утилизации бытовых отходов.

## 1. Характеристики:

- Водонепроницаемый и нескользящий корпус.
- Сменные чистящие насадки с уникальной трехмерной формой щетины и функцией напоминания о замене щетины, чтобы ваши зубы оставались белее и здоровее.
- Высокочастотная вибрация эффективно удаляет зубной налет, глубоко очищая зубы и десны и предотвращая гингивит.
- USB-зарядка, удобно для путешествий и совместимость с мировым напряжением.
- Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора индикатор будет продолжать быстро мигать или зубная щетка не сможет включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости зарядки зубной щетки.
- 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд.
- В зубной щетке есть 5 режимов: отбеливание, чистка, чувствительный, полировка и массаж. В щетку также встроена функция памяти режимов, что означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию остается таким же, как и режим, который был установлен во время последнего отключения зубной щетки.

## 2. Конструкция:

- ① Насадка щетки
- ② Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
- ③ Отбеливание
- ④ Чистка
- ⑤ Чувствительный
- ⑥ Полировка
- ⑦ Массаж
- ⑧ Индикатор зарядки
- ⑨ Ручка
- ⑩ Порт зарядки

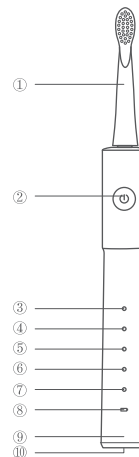

## 3. Операции:

### ☆ Использование зубной щетки

- Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении.
- Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание».
- Переключайтесь между 5 режимами («Отбеливание, Чистка, Чувствительный, Полировка и Массаж»), непрерывно нажимая кнопку «Питание».
- Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты.
- Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии десен.
- Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение длительного периода времени.
- Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости перейти в другую часть ротовой полости.
- Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты.

- Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты, включайте зубную щетку только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее из рта только после выключения.

#### ☆ **Замена насадки для зубной щетки**

- Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она находится в правильном положении.
- Отсоединение: крепко держите основание, затем потяните насадку зубной щетки от ручки.

#### ☆ **Зарядка зубной щетки**

- Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она полностью заряжена для повторного включения.
- Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.
- Если во время работы индикатор быстро мигает, это означает, что в зубной щетке разряжен аккумулятор, зарядите зубную щетку как можно скорее.
- Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания.
- Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорится на две минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 25 дней.
- Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно безопасно использовать в ванной.

#### ☆ **Режимы**

##### • **Первый режим: Отбеливание**

В этом режиме белый индикатор включается в положении режима «Отбеливание», где размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Подходит для пользователей, которые предъявляют высокие требования к чистящему эффекту и не имеют чувствительных зубов.

##### • **Второй режим: Чистка**

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Чистка», где движение щетки нормальное, а интенсивность вибрации находится на средней скорости. Он подходит для нормального состояния ротовой полости, для получения сильнейшего очищающего эффекта и поддержания здоровой гигиены полости рта.

##### • **Третий режим: Чувствительный**

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Чувствительный», где движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации самая мягкая из пяти режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами.

##### • **Четвертый режим: Полировка**

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Полировка», где движения щетки и интенсивность вибрации быстро меняются. Такой эффект можно использовать для дополнительной обработки области резов, имеющей отбеливающий эффект.

##### • **Пятый режим: Массаж**

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима «Массаж», где движения щетки и интенсивность вибрации меняются медленно. Эта мягкая стимуляция призвана сохранить упругость и здоровье десен.

## 4. Технические характеристики:

Рабочая температура: 0–50°C

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока

Материал щетины: нейлон

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока

Номинальная мощность: 2 Вт

Водонепроницаемость: IPX7

## 5. Меры предосторожности:

- Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без разрешения.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться с врачом перед использованием.
- Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, должны находиться под присмотром родителей или взрослых.
- Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время.
- Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей.
- Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам.
- Не подходит для детей младше 12 лет.

## 6. Послепродажное обслуживание:

- Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с Fairwill.
- В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от ситуации и его состояния.
- Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить Fairwill зубную щетку и подтверждение даты покупки (счет-фактуру).
- Гарантия не распространяется на следующее:
  - Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания,

- подключением к неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.
- Старение и износ в результате нормального использования.
- Повреждения из-за использования продукта для других целей или использования компонентов, не от Fairywill.

## **7. Контакт:**

 Fairywill

 [www.fairywill.com](http://www.fairywill.com)

 [support@fairywill.com](mailto:support@fairywill.com)

Произведено в Китае