



# REVYLINE

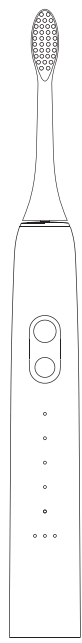

## RL 015

Электрическая звуковая зубная щетка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

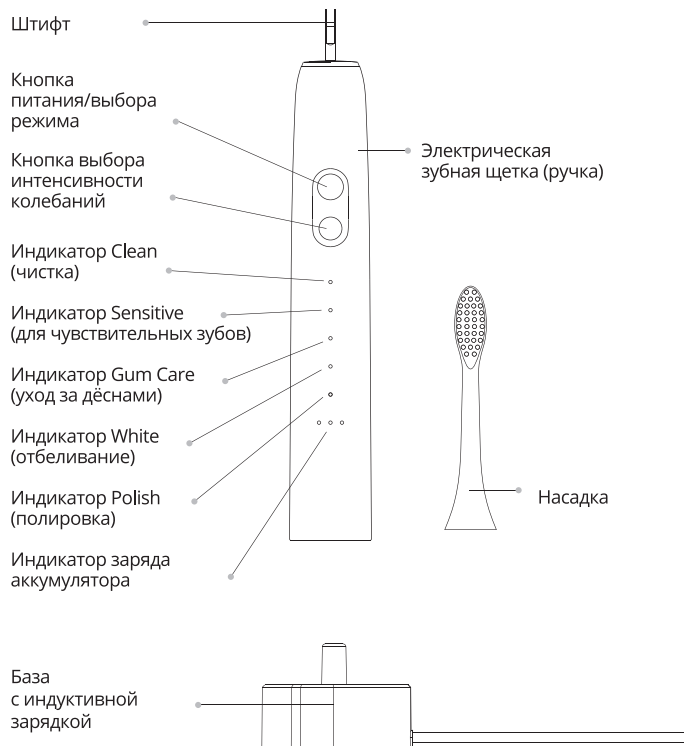

### Поздравляем!

Уважаемый клиент, Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит Вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

### Меры предосторожности

Перед первым применением щетки Revyline RL 015 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её.

### Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в ёмкость с водой или раковину.
5. Не устанавливайте щётку на влажную зарядную площадку.
6. Храните прибор и детали к нему в недоступном для детей и лиц с психическими расстройствами месте.
7. Храните прибор в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
8. Не следует хранить щетку на зарядной базе. По окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.
9. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении кабеля.
10. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
11. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
12. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
13. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
14. Не используйте щетку при наличии ранок в полости рта или на языке.
15. Сменные насадки предназначены для строго индивидуального использования. Их совместное использование несколькими лицами запрещено.
16. Не используйте для очищения прибора посудомоечную машину.

Прибор не следует использовать лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими возможностями или с психическими расстройствами, а также лицам с недостаточным опытом использования прибора – до тех пор, пока ответственный за их безопасность человек не убедится в том, что они изучили инструкцию или готовы использовать прибор под присмотром.

### Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядную базу к источнику электропитания, поместить на нее зарядную площадку и вертикально установить щетку. О динамике зарядки аккумулятора можно судить по индикаторам на дисплее корпуса. Один индикатор горит ровным красным светом – менее 30% зарядки; Горят два индикатора ровным красным светом – 33-67% зарядки; Ровным красным светом горят три индикатора – 67%-100% зарядки;

При полной зарядке аккумулятора в течение 30 секунд горит ровный зеленый свет и затем гаснет. Прекращение мигания индикатора свидетельствует об окончании зарядки. В результате полной зарядки аккумулятора на дисплее загорается зеленый цвет индикатора. Время полной зарядки аккумулятора 18 часов.

### Включение прибора

Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания. Для выключения необходимо удерживать кнопку в течение двух секунд, либо прибор выключится сам по истечении 2 минут работы. Предусмотрено автоматическое отключение прибора через две минуты работы (в режиме White – через 2, 5 минуты).

### Выбор режима чистки

Конструкция электрической щетки Revyline RL 015 позволяет использовать пять режимов работы и три уровня интенсивности колебаний щетины.

### Clean (чистка):

Интенсивный режим чистки. Самый мощный из всех имеющихся режимов. Данный режим рекомендован для постоянного применения тем пользователям, кто ранее уже использовал высокочастотные звуковые щетки;

### Sensitive (для чувствительных зубов):

Щадящий режим вибрации. Данный режим рекомендован для начинающих пользователей с целью постепенного привыкания к воздействию звуковой зубной щетки, или для тех, кому не подходит интенсивный режим, в частности, людям, страдающим повышенной чувствительностью зубов.

### Gum Care (уход за деснами):

Режим отличается повышенной амплитудой колебания щетинок. Этим достигается максимальная эффективность массажа, происходит укрепление мягких тканей дёсен.

### White (отбеливание):

Устранение пигментированного налёта и отбеливание эмали происходит за счет чередования параметров амплитуды колебаний щетинок и увеличенной (до 2,5 минут) длительности процедуры.

### Polish (полировка):

Позволяет вернуть эмали природный блеск и яркость. Выбор режима осуществляется последовательным нажатием соответствующей кнопки. При активизации выбранного режима загорается световой индикатор.

### Блокировка режима

Для того, чтобы заблокировать необходимый режим необходимо: Включить щетку; Выбрать нужный режим; Нажать одновременно кнопки выбора режима и питания и удерживать их в течение 3-х секунд. Индикаторы всех режимов одновременно загорятся и погаснут. **Внимание!** Во время блокировки режима переключатель режимов не работает. Для разблокировки необходимо нажать обе кнопки одновременно и удерживать в течение 3-х секунд. Индикаторы всех режимов мигнут дважды. Это означает, что параметры текущего режима сняты и все функции вернулись в исходное состояние.

### Уровень интенсивности

Для каждого режима работы можно подобрать один из трех уровней интенсивности колебаний щетинок. Выбор осуществляется нажатие соответствующей кнопки и подтверждается свечением индикаторов. Если горит один индикатор – минимальный уровень интенсивности, два – средний, три – максимальная амплитуда колебаний чистящей головки.

### Установка и замена насадки


Установите насадку, надев ее на металлический сердечник таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки. Плотно прижмите головку щетки к металлическому штифту.

**Внимание!** Между насадкой и корпусом щетки предусмотрен небольшой зазор (0,3-1,2 мм).

### Процесс чистки

1. Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как он необходим при вибрации чистящей головки. Убедитесь, что насадка вставлена правильно и включите щетку.
2. Намочите чистящую головку, затем нанесите немного зубной пасты на щетину. Настоятельно не рекомендуется включать щетку перед или в момент нанесения. Это может привести к разбрызгиванию зубной пасты.
3. Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре условных зоны одинакового размера и очищайте их поочередно.
4. Не надавливайте чистящей головкой слишком энергично на зубную поверхность, иначе можно травмировать эмаль и десны. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательные-возвратные движения.
5. После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой, промойте под проточной водой чистящую головку щетки.

Чистите по 30 секунд каждую сторону:

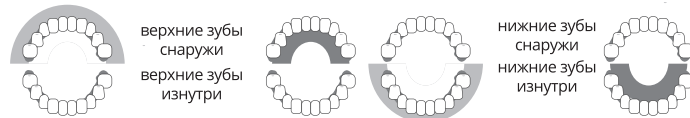

### Уход за зубной щеткой

Электрическая зубная щетка Revyline RL 015 требует регулярного ухода. Ополаскивайте ручку и насадку-щетку чистой проточной водой. При необходимости протрите все поверхности мягкой тканью с мылом. Храните щетку в сухом месте, подальше от солнечных лучей.

### Сменные насадки

В базовой комплектации прибора две стандартные сменные насадки средней жесткости. После 3-6 месяцев регулярного использования насадки изнашиваются, их рекомендуется менять. **Внимание!** Совместное использование одной насадки различными пользователями строго запрещено.

### Гарантия

Гарантия на прибор 2 года. Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

### Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие; На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); При нарушении правил эксплуатации, и/или хранения, или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к непредусмотренному правилам эксплуатации источнику питания; На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками; На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей; На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

### Распространенные проблемы и их решение

**Проблема:** Сложности выбора уровня интенсивности  
**Решение:** После включения прибора выберите необходимый уровень интенсивности колебания щетины. Для повышения эффективности чистки используйте максимальный уровень колебания щетинок. При этом важно, чтобы выбранный режим не причинял дискомфорта. При необходимости можно выбрать менее интенсивный режим работы устройства.  
**Проблема:** Кровоточивость дёсен во время чистки  
**Решение:** Не волнуйтесь. Чаще всего это наблюдается у тех пользователей, которые используют электрическую щетку впервые. Начинать знакомство с щеткой необходимо с наиболее мягкого и безопасного режима Sensitive. Вскоре кровоточивость должна прекратиться. Если при дальнейшем использовании щетки неприятные ощущения и кровоточивость продолжают, чистку необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

### Комплектация

Основной блок щетки Revyline RL 015;  
Стандартная насадка — 3 шт.;  
База с индуктивной зарядкой;  
Пенал;  
Инструкция.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 015  
Предназначена для эффективной чистки зубов.  
Частота пульсаций: 31 000 – 40 000 колебаний в мин.  
Пять режимов работы.  
Три уровня интенсивности.  
Материал корпуса: ABS + PC.  
Материал щетины: нейлон DuPont.  
Защита от влаги: IPX7.  
Ёмкость аккумулятора: 2 000 mAh.  
Потребляемая мощность: 3,7 Вт.  
Время полной зарядки: : 18 часов.  
После полной зарядки прибор работает до 90 дней при условии использования его 2 раза в день.  
Индуктивная зарядка аккумулятора.  
Уровень шума: менее 60 дБ  
Габариты: 251 X 29 X 28,5 мм.  
Вес: 139 г (включая чистящую головку).  
Средний срок службы: 5 лет.  
Гарантия: 2 года.

Произведено по заказу ИП Паршунин С.Г.:  
г. Москва, ул. Хабаровская, д. 17/13.  
Изготовлено: Shenzhen Fortunecom Technology Co.,Ltd.,  
No.57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street,  
Longgang District, Shenzhen City, China.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати