

CURAPROX HYDROSONIC



Инструкция и советы
по применению Звуковых
зубных щеток **Hydrosonic**
от **CURAPROX**

CURAPROX

Инструкция и советы
по применению
HYDROSONIC PRO



Компания Курапрокс поздравляет Вас с приобретением электрической звуковой зубной щетки Hydrosonic PRO CURAPROX. CURAPROX - это бренд профессиональных средств для гигиены полости рта. Производитель продукции - CURADEN - AG базируется в г.Криенс, Швейцария. С 1972 года компания сотрудничает с экспертами в области преподавания, практических исследований и разработок атрауматичных и эффективных средств гигиены полости рта.

Hydrosonic PRO CURAPROX – это звуковая зубная щетка для профессиональной чистки зубов в домашних условиях для ежедневного поддержания здоровья зубов и десен. Особенно подходит пациентам с пломбами, реставрациями, имплантатами, в период ортодонтического лечения и на любом этапе лечения заболеваний десен.

Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните его для дальнейшего применения.


СОДЕРЖАНИЕ

CURAPROX

Состав набора	стр 2
Технические характеристики	стр 3
Правила утилизации	стр 4
Режимы работы	стр 5
Звуковая технология	стр 6
Насадки	стр 7
Насало работы	стр 8
Зарядное устройство	стр 8
Инструкция	стр 9
Дополнительная инструкция для Single	стр 12
Гигиена ортодонтических конструкций	стр 12
Устранение неполадок	стр 13

Состав набора HYDROSONIC PRO

- 1 × Hydrosonic PRO
- 1 × «sensitive» насадка
- 1 × «power» насадка
- 1 × «single» насадка
- 1 × Зарядное устройство с USB
- 1 × USB разъём
- 1 × футляр для путешествий
- 1 × инструкция по эксплуатации

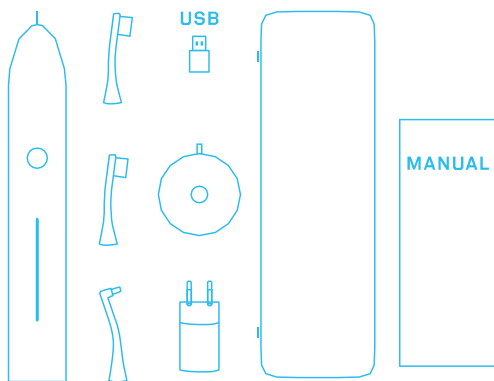

Технические характеристики: HYDROSONIC PRO

Для USB разъема:

- Адаптер питания вход: 100-240 VAC, 50/60Hz, 2.0A max.
- Адаптер питания выход: 5.0 VDC, 600mA

Технические характеристики зарядной станции с USB-кабелем:

- Зарядная станция выход: 5.0 VDC, 600mA
- Основание на резиновых ножках

Технические характеристики держателя (ручки):

- Батарея: литий-ионная (3.7 V DC, 700mAh)
- Оптимальное время зарядки аккумулятора: 10 часов
- Время работы на заряде батареи приблизительно 60 мин. что эквивалентно 15 дням непрерывной работы.
- Динамика колебаний 22000, 32000, 42000
- Таймер смены области чистки: 30 сек.
- Таймер минимальной чистки: 2 мин.
- Автоматическое выключение: через 4 мин.

Аксессуары:

- 1 «sensitive» насадка
- 1 «power» насадка
- 1 «single» насадка
- 1 зарядное устройство с USB-кабелем
- 1 USB разъем
- 1 футляр для путешествий
- 1 инструкция

Внимание!

Если Вы недавно перенесли стоматологическое хирургическое вмешательство, перед использованием этого устройства обратитесь к Вашему лечащему врачу за консультацией по использованию Hydrosonic. Зубная щетка Hydrosonic EASY разрешена к использованию детьми и лицами с ограниченными мануальными навыками, перед применением должен быть проведен инструктаж по безопасному использованию устройства. Обслуживание устройства не должно производиться детьми. Дети не должны играть с прибором.

Электрические зубные щетки Hydrosonic соответствуют стандартам безопасности электромагнитных устройств.

Если у Вас установлен кардиостимулятор обратитесь к Вашему лечащему врачу для дополнительной консультации по использованию Hydrosonic.

Примечание по технике безопасности.

Внимание! для повторной зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый с данным прибором. Устройство содержит зарядные батареи, которые не подлежат замене. Перед использованием, пожалуйста, проверьте, что напряжение, заявленное на приборе, соответствует вашему местному сетевому напряжению. Если зарядное устройство или соединительный кабель повреждены, пожалуйста, не используйте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, то все устройство должно быть заменено. Все ремонтные работы должны выполняться дилером или специализированным отделом клиентского сервиса. Держите зарядное устройство подальше от воды и не погружайте в воду или другие жидкости.

Очистка зарядного устройства:

Перед очисткой отсоедините устройство от сети.

Подключайте зарядное устройство только после того, как оно полностью высохнет. Никогда не заряжайте устройство без присмотра.

Утилизация:

По истечении срока службы не выбрасывайте Устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Для утилизации Устройства и встроенного аккумулятора отнесите их в центр утилизации или официальный пункт сбора.



Режимы работы:


Нажмите и удерживайте кнопку: Hydrosonic будет работать в каждом из своих режимов.

Hydrosonic PRO имеет семь режимов работы

Каждый режим имеет свою интенсивность индикации светодиода.(см.рис.)

Hydrosonic PRO имеет семь режимов работы

Каждый режим имеет свою интенсивность индикации светодиода.(см.рис.)

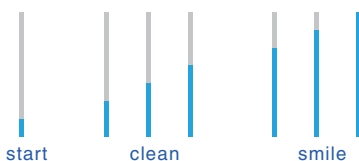

РЕЖИМ «START»

22 000 колебаний в минуту.

Данный режим используют с насадкой «Single» для очистки брекетов, коронок, областей вокруг имплантатов и для ухода за линией десневой борозды.

РЕЖИМ «CLEAN»

32 000 колебаний в минуту. Три интенсивности. Для насадок «sensitive» и «power».

РЕЖИМ «SMILE»

42 000 в минуту. Три интенсивности. Для насадок «sensitive» или «power».

ВЫБОР РЕЖИМА:

для выбора режима нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. В нужном Вам режиме отпустите кнопку. При включении зубная щетка Hydrosonic PRO запустится в последнем выбранном Вами режиме. При слишком сильном давлении на зубы и десны движение щетинок автоматически уменьшится.

ПАУЗЫ ПРИ РАБОТЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ:


В интервале 30 сек. щетка делает три коротких паузы на 3 сек.

Звуковая технология.


Hydrosonic Pro удаляет налет благодаря звуковой технологии и гидродинамическому эффекту. Звуковая технология зубной щетки Hydrosonic PRO обеспечивает наиболее эффективную чистку зубов, чем мануальная зубная щетка. Этой щеткой невозможно повредить десны или зубы.

- Гидродинамика: от 30000 колебаний в минуту и выше приводит к гидродинамической турбулентности в смеси слюны, воды и зубной пасты. Эта турбулентность удаляет биопленку там, куда не попадают щетинки обычной зубной щетки.
- Для максимально качественной гигиены зубов используйте зубной щетки Hydrosonic Pro с оригинальными насадками.

Профессор Ульрих П. Саксер признал преимущества каплевидной формы насадки для очищения каждого зуба.

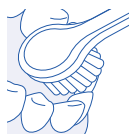

Длинные щетинки расположены снаружи, короткие - внутри: такое расположение щетинок обеспечивает максимальное очищение различных поверхностей каждого зуба для оптимальной механической и гидродинамической очистки.

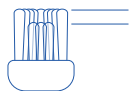

Движение.

Щетинки движутся по горизонтали так быстро, что создаваемая турбулентность перемещает смесь слюны, воды и зубной пасты во рту. Это позволяет очищать все труднодоступные участки.



Эргономика

Насадки слегка изогнуты. Идеальный изгиб CURACURVE в 10 и 15 градусов повышают эргономику и очистку труднодоступных зон.



Комфорт

Прорезиненная оборотная сторона насадок для большего комфорта в дистальных областях полости рта.

Все насадки для Hydrosonic PRO производятся в Швейцарии.

Насадки для Hydrosonic PRO

Разработаны совместно с Профессором Ulrich P. Saxer и специалистом по гигиене полости рта Jiri Sedelmayer.

НАСАДКА «POWER»

Маленькая каплевидная головка запатентованными щетинками CUREN® для очистки каждого зуба.



power



power

НАСАДКА «SENSITIVE»

Маленькая каплевидная головка запатентованными щетинками CUREN® для очистки каждого зуба. Подходит для чувствительных десен.



sensitive



sensitive

НАСАДКА «SINGLE»

Для ухода за имплантами, ортодонтическими конструкциями, за зубами с нестандартным расположением. Подходит для полировки поверхности зубов



single



single

ЩЕТИНКИ:

Мы используем запатентованные щетинки Curen®, а не стандартные нейлоновые щетинки. CUREN® почти не впитывает влагу, что позволяет щетке быть максимально функциональной и сохранять свои очищающие свойства надолго. Щетинки CUREN® прекрасно переносят частоту 42 000 колебаний в минуту.




Начало работы

Выберите насадку

«sensitive» «power» «single»

Насадки зубных щеток легко одеть и снять.

Не сгибать!

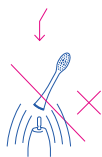

Включение/Выключение щетки

происходит при кратковременном нажатии кнопки.


Выбор режима:

Для выбора режима нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.

В нужном Вам режиме отпустите кнопку.

При включении зубная щетка Hydrosonic запустится в последнем выбранном Вами режиме.

При слишком сильном давлении на зубы и десны движение щетинок автоматически уменьшится.

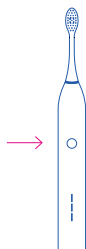


Зарядное устройство:



- Полностью зарядите Вашу электрическую зубную щетку Hydrosonic подключив ее к сети. Вы также можете зарядить устройство с помощью USB-порта от Вашего ноутбука или компьютера.
- Вы можете отслеживать состояние заряда Hydrosonic когда снимаете ее зарядного устройства или выключаете щетку. Аккумулятор полностью заряжен, если светодиодный дисплей горит полностью. Чем больше светодиодов загорается, тем больше заряжен аккумулятор. Если самый низкий светодиод горит красным, а не синим, батарея заряжена менее, чем на 20%.
- При полной зарядке аккумулятора хватает на 60 минут работы, что соответствует примерно двум неделям ежедневной чистки зубов в течение четырех минут.
- Рекомендация для более длительного срока службы: не заряжайте устройство, пока состояние батареи не упадет ниже 20% , об этом Вам сообщит красный светодиод.
- Примечание: производительность очистки не зависит от уровня заряда батареи. Hydrosonic одинаково работает как при слабо заряженной батарее, так и тогда, когда она заряжена полностью.
- Внимание: чтобы очистить устройство, протрите держатель и зарядное устройство влажной тканью. Никогда не промывайте зарядное устройство проточной водой.

Инструкция по применению HYDROSONIC PRO


Смочите головку щетки и нанесите немного зубной пасты CURAPROX*. Поместите зубную щетку в полость рта так, чтобы щетинки находились наполовину на зубах, а наполовину на деснах.

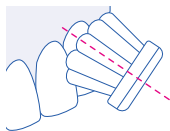

Наклоните Hydrosonic Pro под 45° к десне. Выполняйте движения медленно и без давления. Через 30 секунд три короткие паузы подскажут Вам, что пришло время перейти к другому участку зубов в полости рта.

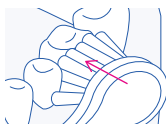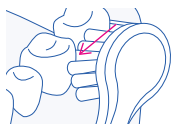


Очищайте каждый зуб отдельно: останавливайтесь на каждом зубе в течение двух-трех секунд. Не оказывайте давления на щетку.

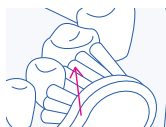

Очищайте все участки зубов пока они не станут чистыми. Всегда используйте один и тот же порядок.



Очищайте все участки зубов пока они не станут чистыми. Всегда используйте один и тот же порядок.

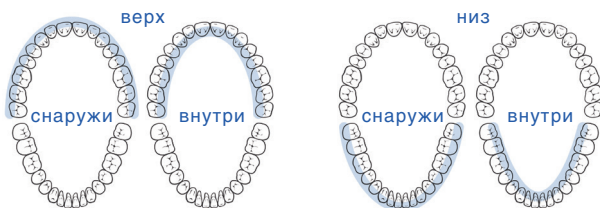



*Все зубные пасты CURAPROX не содержат SLS и комфортны при использовании звуковых зубных щеток, т.к. не создают большое количество пены во рту.

Звуковая зубная щетка Hydrosonic Pro идеально подходит для чистки ортодонтических конструкций и конструкций вокруг имплантатов.

Для детей и подростков особенно важно тщательное очищение жевательных поверхностей. Hydrosonic PRO справится с этим идеально, очищая каждый зуб по отдельности в течении 2-3 секунд и без давления на зуб.




Звуковая зубная щетка Hydrosonic PRO подходит для пломб, имплантатов, коронок и виниров. Используйте Hydrosonic PRO согласно инструкции.

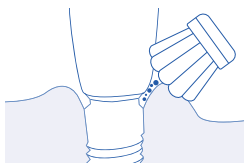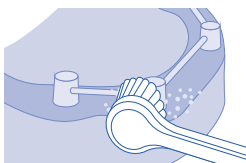


Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух минут. Увеличение времени чистки улучшит здоровье полости рта. Насадки для щетки имеют мягкие и тонкие запатентованные щетинки CUREN®, которые выдерживают нагрузки звуковой волной в 42000 колебаний в минуту. Меняйте насадки для щетки не реже чем раз в три месяца. После использования промойте головку щетки под проточной водой. Если вы очищаете брекеты, то износ щетины повышается. Меняйте насадку щетки через семь-восемь недель.

Чистка верхних и нижних передних зубов: чтобы очистить внутреннюю часть зубов держите Hydrosonic PRO вертикально, поочередно наклоняя его в правую и левую сторону по несколько раз, далее переходите к чистке следующего зуба.

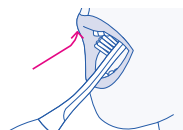


Для очищения линии десневой борозды используйте насадку «Single».


В области десневой борозды и между зубами скрывается большое количество бактерий. Монопучковая насадка щетки позволяет деликатно очистить линию десневой борозды:

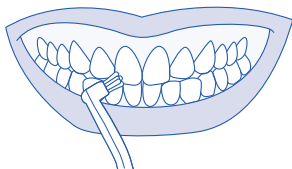


Установите зубную щетку перпендикулярно поверхности зуба. Допустимо применение насадки «Single» без использования зубной пасты. Щетинки должны мягко входить в линию Десневой борозды.

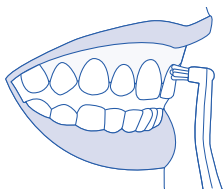

Двигайтесь вдоль линии десен, не прилагая давления. Перемещайте насадку с одной стороны зуба на другую. Всегда держите зубную щетки перпендикулярно поверхности зуба.

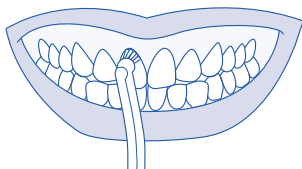


Очищайте зубы со всех сторон.

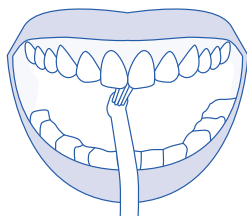

Дополнительные инструкции для насадки «Single»

Для очистки зубов с нестандартным расположением двигайтесь вдоль линий зуба для его полной очистки

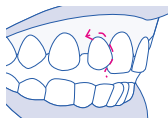


Большое количество зубного налета:

При большом количестве зубных отложений используйте насадку «Single». Очищайте зубной ряд вдоль линии десны и десневой борозды без давления.




Имплантаты:

Чтобы обеспечить долгий срок службы имплантатам за ними нужно тщательно ухаживать. Тщательно и без давления очищайте линию десны вокруг имплантата с помощью насадки «single»

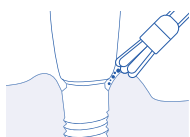


С помощью языка убедитесь в гладкости ваших зубов.

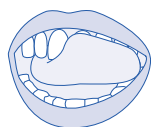


Гигиена зубов с брекетами.

Брекеты создают дополнительные зоны для гигиены. Очищение этих зон является решающим фактором в здоровье полости рта.

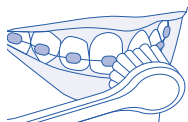

Базовая чистка:

Используйте насадку «sensitive» или «power». Переходите от зуба к зубу, очищая брекеты вдоль линии десневой борозды.

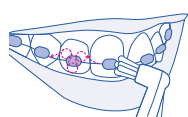

Для очищения ретейнеров и лингвальных брекетов используйте насадку «single» в режиме «Start», плавно и медленно, не создавая давления, очищайте зубной ряд.



После снятия брекетов продолжайте так же тщательно очищать зубы используя все необходимые насадки.

Информация по устранению неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Устройство не работает	Устройство не заряжено	Зарядите устройство
Перед первым применением полностью зарядите устройство. Зарядка занимает около 10 часов		
Чистка зубов менее эффективна	Насадка загрязнена или изношена	Очистите или замените насадку
Вы чувствуете легкое покалывание при использовании звуковой зубной щетки	Если вы используете звуковую зубную щетку в первый раз-это нормально.	Вы привыкнете к ощущениям после использования звуковой зубной щетки в течение некоторого времени

Долгий интервал прерывания работы щетки означает, что щетка работала в 2 мин. режиме. Через 4 мин. работы Hydrosonic Pro автоматически выключится.

Инструкция и советы
по применению
HYDROSONIC EASY



Компания Курапрокс поздравляет Вас с приобретением электрической звуковой зубной щетки Hydrosonic EASY CURAPROX. CURAPROX - это бренд профессиональных средств для гигиены полости рта. Производитель продукции - CURADEN - AG базируется в г.Криенс, Швейцария. С 1972 года компания сотрудничает с экспертами в области преподавания, практических исследований и разработок атравматичных и эффективных средств гигиены полости рта.

Hydrosonic EASY CURAPROX – это звуковая зубная щетка для профессиональной чистки зубов в домашних условиях для ежедневного поддержания здоровья зубов и десен. Особенно подходит пациентам с пломбами, реставрациями, имплантатами, в период ортодонтического лечения и на любом этапе лечения заболеваний десен.

Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните его для дальнейшего применения.


СОДЕРЖАНИЕ

CURAPROX

Состав набора	стр 16
Технические характеристики Киж	стр 17
Утилизация	стр 18
Начало работы	стр 19
Режимы	стр 20
Устранение неполадок	стр 21
Чистка зубов. Рекомендации	стр 21
Звуковая технология	стр 25
Насадки	стр 27

Состав набора HYDROSONIC EASY

- 1 × Hydrosonic EASY
- 1 × «sensitive» насадка
- 1 × Зарядное устройство с USB
- 1 × USB разъём
- 1 × футляр для путешествий
- 1 × инструкция по эксплуатации

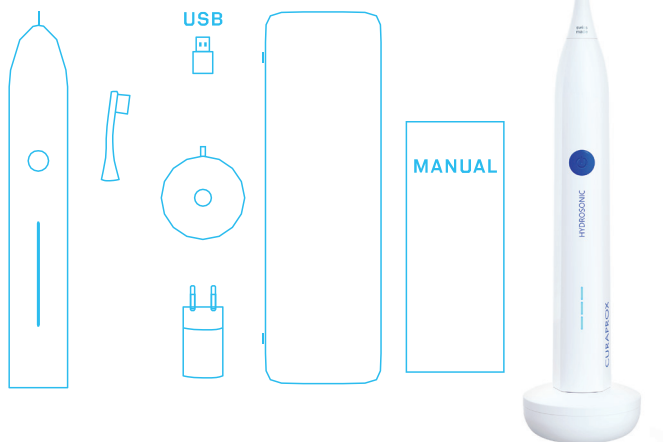

Технические характеристики: HYDROSONIC EASY

Для USB разъема:

- Адаптер питания вход: 100-240 VAC, 50/60Hz, 2.0A max.
- Адаптер питания выход: 5.0 VDC, 600mA

Технические характеристики зарядной станции с USB-кабелем:

- Зарядная станция выход: 5.0 VDC, 600mA
- Основание на резиновых ножках

Технические характеристики держателя (ручки):

- Батарея: литий-ионная (3.7 V DC, 700mAh)
- Оптимальное время зарядки аккумулятора: 10 часов
- Время работы на заряде батареи приблизительно 60 мин.
что эквивалентно 15 дням непрерывной работы.
- Динамика колебаний 22000, 32000, 42000
- Таймер смены области чистки: 30 сек.
- Таймер завершения чистки: 2 мин.
- Автоматическое выключение: через 4 мин.

Аксессуары:

- 1 «sensitive» насадка
- 1 зарядное устройство с USB-кабелем
- 1 USB разъем
- 1 футляр для путешествий
- 1 инструкция

Внимание!

Если Вы недавно перенесли стоматологическое хирургическое вмешательство, перед использованием этого устройства обратитесь к Вашему лечащему врачу за консультацией по использованию Hydrosonic. Зубная щетка Hydrosonic EASY разрешена к использованию детьми и лицами с ограниченными мануальными навыками, перед применением должен быть проведен инструктаж по безопасному использованию устройства. Обслуживание устройства не должно производиться детьми. Дети не должны играть с прибором.

Электрические зубные щетки Hydrosonic соответствуют стандартам безопасности электромагнитных устройств.

Если у Вас установлен кардиостимулятор обратитесь к Вашему лечащему врачу для дополнительной консультации по использованию Hydrosonic.

Примечание по технике безопасности.

Внимание! для повторной зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый с данным прибором. Устройство содержит зарядные батареи, которые не подлежат замене. Перед использованием, пожалуйста, проверьте, что напряжение, заявленное на приборе, соответствует вашему местному сетевому напряжению. Если зарядное устройство или соединительный кабель повреждены, пожалуйста, не используйте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, то все устройство должно быть заменено. Все ремонтные работы должны выполняться дилером или специализированным отделом клиентского сервиса. Держите зарядное устройство подальше от воды и не погружайте в воду или другие жидкости.

Очистка зарядного устройства:

Перед очисткой отсоедините устройство от сети.

Подключайте зарядное устройство только после того, как оно полностью высохнет. Никогда не заряжайте устройство без присмотра.

Утилизация:

По истечении срока службы не выбрасывайте Устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Для утилизации Устройства и встроенного аккумулятора отнесите их в центр утилизации или официальный пункт сбора.




Начало работы

Выберите насадку

«sensitive» и «power» стандартные насадки для чистки зубов, ортопедических конструкций, ортодонтических конструкции и конструкций на имплантах.

«single» монопучковая насадка для деликатной очистки линии десневой борозды, а так же вокруг брекетов, коронок и имплантатов

Насадки зубных щеток легко одеть и снять. Не гнать!

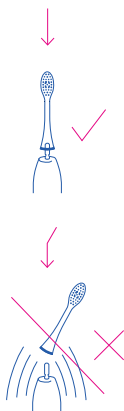

Включение/Выключение щетки

происходит при кратковременном нажатии кнопки.


Выбор режима:

Для выбора режима нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.

В нужном Вам режиме отпустите кнопку.

При включении зубная щетка Hydrosonic запустится в последнем выбранном Вами режиме.

При слишком сильном давлении на зубы и десны движение щетинок автоматически уменьшится.

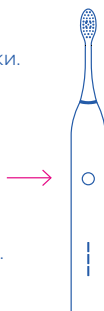

Зарядное устройство:

- Полностью зарядите Вашу электрическую зубную щетку Hydrosonic подключив ее к сети. Вы также можете зарядить устройство с помощью USB-порта от Вашего ноутбука или компьютера.
- Вы можете отслеживать состояние заряда Hydrosonic когда снимаете ее зарядного устройства или выключаете щетку. Аккумулятор полностью заряжен, если светодиодный дисплей горит полностью. Чем больше светодиодов загорается, тем больше заряжен аккумулятор. Если самый низкий светодиод горит красным, а не синим, батарея заряжена менее, чем на 20%.
- При полной зарядке аккумулятора хватает на 60 минут работы, что соответствует примерно двум неделям ежедневной чистки зубов в течение четырех минут.
- Рекомендация для более длительного срока службы: не заряжайте устройство, пока состояние батареи не упадет ниже 20% , об этом Вам сообщит красный светодиод.

- Примечание: производительность очистки не зависит от уровня заряда батареи. Hydrosonic одинаково работает как при слабо заряженной батарее, так и тогда, когда она заряжена полностью.
- Внимание: чтобы очистить устройство, протрите держатель и зарядное устройство влажной тканью. Никогда не промывайте зарядное устройство проточной водой.

Режимы работы:

Нажмите и удерживайте кнопку: Hydrosonic будет работать в каждом из своих режимов. Hydrosonic PRO имеет семь режимов работы. Каждый режим имеет свою интенсивность индикации светодиода.(см.рис.)

Hydrosonic EASY имеет семь режимов работы. Каждый режим имеет свою интенсивность индикации светодиода.(см.рис.)

РЕЖИМ «START»

22 000 колебаний в минуту.

При индикации нижнего светодиода устройство находится в режиме «пуск». Данный режим стимулирует кровообращение в деснах.



РЕЖИМ «CLEAN»

32 000 колебаний в минуту. При индикации среднего светодиода устройство находится в режиме «clean». Данный режим подходит для оптимального удаления зубного налета и бактерий.



РЕЖИМ «SMILE»

42 000 в минуту. При индикации верхнего светодиода устройство находится в режиме «smile». Данный режим позволяет чистить особо чувствительные зубы и десны.



ВЫБОР РЕЖИМА:

для выбора режима нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. В нужном Вам режиме отпустите кнопку. При слишком сильном давлении на зубы и десны движение щетинок автоматически уменьшится.

ПАУЗЫ ПРИ РАБОТЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ:

В интервале 30 сек. щетка делает три коротких паузы на 3 сек.

Информация по устранению неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Устройство не работает	Устройство не заряжено	Зарядите устройство
Чистка зубов менее эффективна	Насадка загрязнена или изношена	Очистите или замените насадку
Вы чувствуете легкое покалывание при использовании звуковой зубной щетки	Если вы используете звуковую зубную щетку в первый раз-это нормально.	Вы привыкнете к ощущениям после использования звуковой зубной щетки в течение некоторого времени

Долгий интервал прерывания работы щетки означает, что щетка работала в 2 мин. режиме. Через 4 мин. работы Hydrosonic Pro автоматически выключится.

Чистка зубов. Рекомендации.

Насадки для щетки имеют мягкие и тонкие и запатентованные щетинки CUREN, которые выдерживают серьезные нагрузки в 42 000 колебаний в минуту. Меняйте насадки для щетки не реже чем раз в три месяца. После использования промойте головку щетки и щетину под проточной водой. Если вы носите брекеты износ насадки зубной щетки повышается и меняйте насадку щетки через семь-восемь недель.


Начало работы:

Выберите максимально добный для вас режим в процессе чистки. В процессе выбора режима выбирайте насадку наиболее комфортную для себя или воспользуйтесь рекомендацией вашего стоматолога. Все режимы гарантируют максимально эффективную чистку зубов.


Чистка зубов после снятия брекетов. Инструкция.

Как чистить зубы после снятия брекетов? Продолжайте так же тщательно очищать зубной ряд, используя необходимые насадки.

1. Смочите головку щетки и нанесите немного зубной пасты.

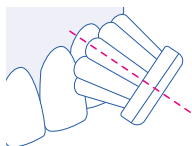


2. Поместите зубную щетку в рот под углом 45 градусов так, чтобы щетка мягко лежала наполовину на зубах, а наполовину на деснах.

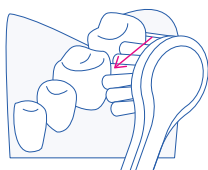


3. Очищайте каждый зуб отдельно: оставайтесь на каждом зубе под углом 45 градусов в течение двух-трех секунд. Не оказывайте никакого давления.

4. Наклоните Hydrosonic Pro так, как будто пытаетесь вставить щетину между зубами. Делайте это очень медленно и без применения давления.

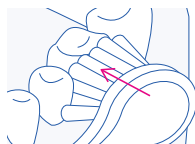

5. Оставайтесь на каждом зубе в течение двух или трех секунд, наклоняя щетку, чтобы тщательно очистить зубы.


6. Через 30 секунд - три короткие последовательные паузы. 0,2 секунды каждая будет означать, что пришло время перейти к другому участку зубов в полости рта.

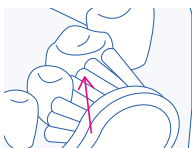

7. Повторите процесс очистки для всех участков зубов в полости рта..




8. Убедитесь, что Вы всегда используете один и тот же порядок при чистке, чтобы не пропустить зуб.

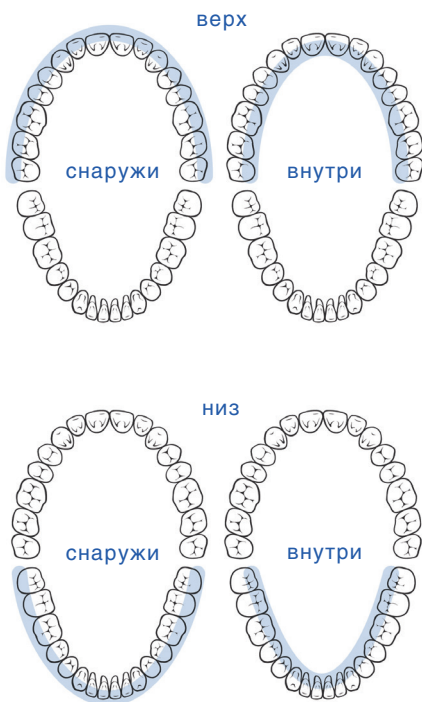

Долгое прерывание указывает на то, что прошло две минуты. Через четыре минуты Hydrosonic Pro автоматически выключается. Вы чистите постоянные имплантаты с помощью Hydrosonic Pro так же, как Вы чистили бы естественные зубы. Вам не нужно беспокоиться, если у вас есть имплантат. Мы настоятельно рекомендуем ухаживать за имплантатами с помощью межзубных и / или имплантологических щеток, потому что линия десен вокруг имплантат должна быть очищена с особой тщательностью. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим стоматологом.

Hydrosonic идеально подходит для чистки ортодонтических конструкций и вокруг имплантатов

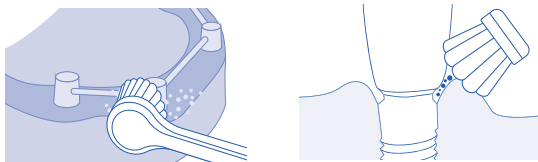

Особенно важно, чтобы дети и подростки тщательно очищали жевательные поверхности. Hydrosonic справится с этим, очищая каждый зуб по отдельности в течении двух-трех секунд для идеальной чистки без давления на зуб.

Подходит для пломб, имплантатов, коронок и виниров: просто используйте Hydrosonic согласно инструкции.

Согласно стоматологическим рекомендациям, чистить зубы следует не менее двух минут. Продление этого времени чистки улучшит здоровье полости рта. Зубная щетка может быть отключена в любое удобное для вас время.



В особых случаях:

Чистка верхних и нижних передних зубов: чтобы очистить внутреннюю часть передних и задних зубов держите Hydrosonic вертикально, поочередно наклоняя его в правую и левую сторону по несколько раз, далее переходите к чистке следующего зуба.



Звуковая технология.

Звуковая технология зубной щетки Hydrosonic обеспечивает наиболее эффективную чистку зубов, чем мануальная зубная щетка. Этой щеткой невозможно повредить десны или зубы.

- Гидродинамика: при колебаниях от 30 000 в минуту и выше звуковая технология приводит к гидродинамической турбулентности смеси слюны, воды и зубной пасты. Эта турбулентность удаляет биопленку там, куда не попадают щетинки обычной зубной щетки, например в межзубных промежутках.

- При использовании зубной щетки Hydrosonic с оригинальными насадками, качество гигиены зубов отвечает самым высоким требованиям. Hydrosonic очищает зубы и межзубные промежутки.

Hydrosonic Pro удаляет налет благодаря звуковой технологии и гидродинамическому эффекту.

«Умные» щетки для умного ухода.

Насколько хороша звуковая зубная щетка, зависит от того, насколько она мощна – и еще более важны насадки для щетки: их расположение и качество щетинок.

Щетинки:

Мы с самого начала использовали запатентованные щетинки Curen°, а не стандартные нейлоновые щетинки. Преимущество: CUREN° почти не впитывает влагу, это позволяет щетке быть максимально функциональной и сохранять свои очищающие свойства надолго. И особенно важно: CUREN°.




Щетинки невероятно мягкие и прекрасно переносят частоту колебаний 42 000 в минуту. Расположение.

Профессор Ульрих П. Саксер признал преимущества каплевидной формы: она гарантирует, что каждый зуб очищается индивидуально, что приводит к высококачественной чистке. Щетинки также расположены на разной высоте так, что эффективно очистить каждый зуб.



Длинные щетинки расположены снаружи, короткие - внутри: такое расположение щетинок обеспечивает максимальное очищение различных поверхностей каждого зуба для оптимальной механической и гидродинамической очистки.

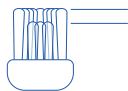

Движение.

Круговое движение головок щеток может повредить линию десен, Если на нее надавить слишком сильно, если щетина слишком твердая или если используются другие неправильные методы. Вот почему наши специалисты по гигиене полости рта выбрали простую вертикаль туда и обратно. Это имеет три преимущества: бережно ухаживает за линией десен, обеспечивает особенно деликатный уход.



Эргономика

Наши насадки слегка изогнуты. Эта кривая 10 градусов имеет большое значение: эргономика значительно улучшена, труднодоступные области, такие как позади моляров или задние части передних зубов легко доступны – благодаря CURACURVE-идеальной кривой.



Комфорт

Как мы можем сделать ваш опыт чистки зубов еще более приятным? Звуковые зубные щетки, в частности, могут доставлять неприятные ощущения, когда задняя часть головки щетки касается зуба. Наше решение: мы прорезинили заднюю часть щетки таким образом, чтобы не мешать работе головки щетки.

Наша инновация

Мы гордимся нашей инновационной швейцарской технологичной насадкой и тем, что мы производим наши насадки в Швейцарии. И мы любим, когда умные пользователи ценят наши усилия. Мы убеждены, что наши головки щеток помогут вам легко и комфортно достичь оптимального состояния полости рта.

Насадки

Вы можете приобрести насадки для Hydrosonic в своей аптеке или на сайте cugaprox.com.

НАСАДКА «SENSITIVE»

С нашими мягкими запатентованными щетинками CUREN. Подходит для чувствительных десен. Маленькая каплевидная форма для эффективной чистки каждого зуба. Поддерживает гидродинамический эффект.



Насадки были разработаны совместно с Профессором Ulrich P. Saxer и специалистом по гигиене полости рта Jiri Sedelmayer.



sensitive



sensitive

CURAPROX

YES, SMILE.

curaden

 better health for you



B001